


Gebrauchsanleitung



#1

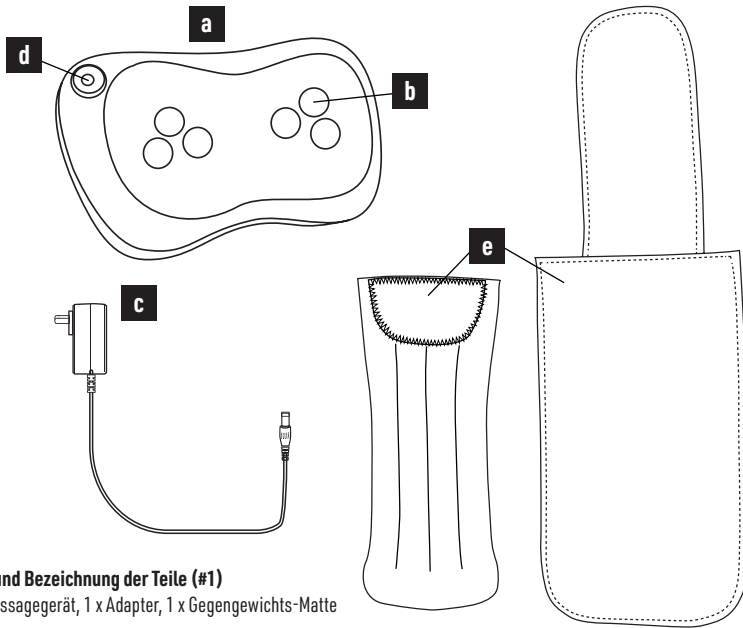


Lieferumfang und Bezeichnung der Teile (#1)

1x ShiatsuYOU Massagegerät, 1 x Adapter, 1 x Gegengewichts-Matte

- a) Belena ShiatsuYOU Massagegerät
- b) 6 x Massageköpfe
- c) Adapter
- d) On/Off Button (zum Ein- und Ausschalten des Massagegeräts und der Wärmefunktion)
- e) Gegengewichtmatte (bestehend aus Pad und Gewicht)

#2

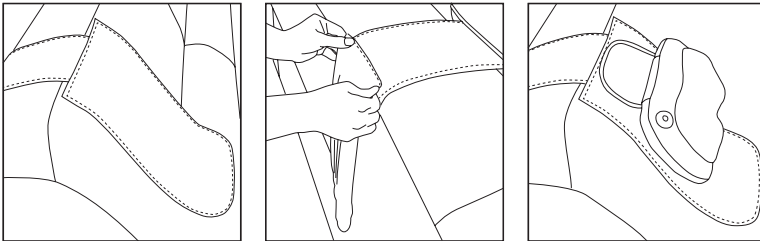

WICHTIGE HINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE:

- Das Kabel des Geräts ausstecken, falls es nicht benutzt wird oder gereinigt werden muss
- Nehmen Sie dieses Gerät nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Ziehen Sie den Stecker sofort, wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist. Berühren Sie nicht das Wasser, wenn das Gerät an Stromkreis angeschlossen ist.
- Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingeschaltet ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie das Produkt gemäß dieser Bedienungsanleitung.
- Zubehörteile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Quetschen, überdehnen und ziehen Sie niemals an dem Gerät oder drehen das Kabel.
- Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Stromkabel oder verwenden es als Griff.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Wartung durch Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren

- Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Menschen mit einer Unempfindlichkeit gegen Hitze sollten die Wärmefunktion vorsichtig verwenden.
 - Die empfohlene Anwendungszeit beträgt 30 Minuten. Falls Sie das Gerät länger verwenden möchten, machen Sie zwischen den Anwendungen mind. eine 30-minütige Pause.
 - Bei dem Produkt handelt es sich nicht um ein medizinisches Gerät.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht bevor Sie schlafen gehen oder während des Schlafens.
 - Sollten Sie wider Erwarten Schmerzen oder Beschwerden verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort.
 - Wenn Sie wegen besonderer Umstände (zB Schwangerschaft, Herzschrittmacher, gesundheitliche Einschränkungen) Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

VERWENDUNG:

Sie können das Gerät sowohl mit als auch ohne Gegengewicht verwenden:

Verwendung mit Gegengewicht: diese Anwendung eignet sich besonders im Sitzen (am Sofa/Couch, Ruhesessel oder Stuhl) für die Massage von Nacken, Schultern oder Rücken Befestigen Sie das Massagegerät mittels Klettverschluss am Pad mit dem Gegengewicht. Nun platzieren Sie das Massagegerät nach Ihren persönlichen Bedürfnissen in der gewünschten Massage-Höhe auf der einen Seite der Sitzfläche und lassen Sie das Gegengewicht (mittels Klettverschluss am Pad fixiert) auf der andere Seite runterhängen. Schalten Sie das Gerät ein und lehnen Sie sich zurück.

Verwendung im Liegen (ohne Gegengewicht): diese Anwendung eignet sich besonders für die Massage von Ober- und Unterschenkeln. Hierbei empfehlen wir eine angenehme, aber dennoch festere Unterlage (Bett/Sofa/Matte), sodass das Massagegerät stabil platziert werden kann.

FUNKTIONEN:

Einschalten: schließen Sie den Adapter an und stecken den Adapter in eine Steckdose. Drücken Sie den Einschaltkopf (On/Off-Button) mindestens 3 Sekunden, um das Massagegerät einzuschalten - die Knet- und Wärmefunktion werden aktiviert. Info: Die Knetrichtung ändert sich jeweils nach einer Minute.

Wärmefunktion: Wenn die Wärmefunktion eingeschaltet ist, drücken Sie den Einschaltknopf kurz, um die Wärmefunktion auszuschalten und drücken sie erneut den Einschaltknopf, um die Wärmefunktion wieder einzuschalten.

Ausschalten: Drücken Sie den On/Off Button mindestens 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

Timer: Nach dem Einschalten des Massagegerätes beginnt der 15 Minuten Countdown – danach schaltet sich das Gerät automatisch aus.

PFLEGE UND WARTUNG:

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das Stromkabel aus der Steckdose gezogen wurde. Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln, die Benzol, Verdünnungsmittel oder andere korrosive Substanzen enthalten. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, verstauen Sie es in der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in direkter Sonneneinstrahlung, um ein Verblässen oder Beschädigung zu vermeiden.

PROBLEMBEHEBUNG	
Problem	Mögliche Ursachen/Lösungen
Das Gerät lässt sich nicht in Betrieb nehmen.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob der Netzadapter und der DC Anschluss stabil angeschlossen sind. Falls dies nach einer langen Verwendung vorgekommen ist, schalten Sie das Gerät aus und schalten es nach ca. einer Stunde wieder ein.
Die Wärmefunktion ist schwach/funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Wärmefunktion eingeschaltet ist (die entsprechende Lampe leuchtet). Wenn die Wärmefunktion eingeschaltet ist, überprüfen Sie, ob rotes Licht aus den Massageköpfen kommt. Wenn das nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Es dauert ca. 2-5 Minuten bis das Gerät sich aufwärmt, bitte warten Sie einen Moment.

TECHNISCHE DATEN	
Gerät	12V==2,0A 24W
Adapter	Input: 100-240V- 50/60Hz 0,7A Output: 12V== 2,0A 24W



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende seiner Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder Vertreiber im Sinne des Elektrozugesetzes eingerichteten Sammelstellen abgeben zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen und Lampen sowie Batterien und Akkus im entladenen Zustand, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, zu trennen und vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Verwenden Sie, wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd-Cadmium, Hg-Quecksilber, Pb-Blei. Verbraucher sind selbst verantwortlich, personenbezogene Daten vom Gerät zu löschen.



Schutzklasse II



Schutzklasse III

Haftungsansprüche gegen die Firma MediaShop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens MediaShop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.



CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 - Kostenlose Servicehotline
ROW: +43 1 267 69 67

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

Stand: 10/2022 | M34832