




Gebrauchsanweisung

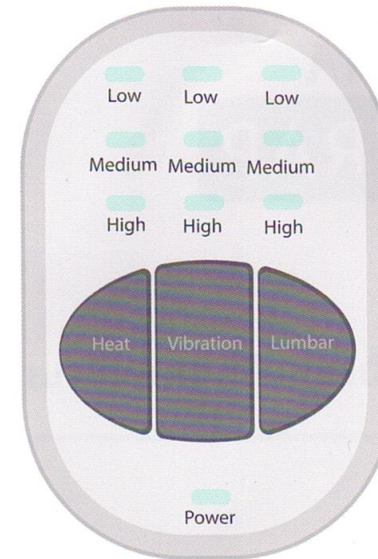

CONTROLLER FUNKTIONEN

Lendenwirbelsäule

Hinweis: Bei allen 3

Lendenwirbeleinstellungen muss die Luft mind. 40 Sekunden lang abgelassen werden. Bitte warten Sie, während die Funktion zu laufen beginnt.

1x drücken = hohe Intensität: Aufblasen/Luft ablassen

2x drücken = hohe Intensität: Kontinuierliches Halten

3x drücken = mittlere Intensität: Aufblasen/Luft ablassen

4x drücken = mittlere Intensität: Kontinuierliches Halten

5x drücken = niedrige Intensität: Aufblasen/Luft ablassen

6x drücken = niedrige Intensität: Kontinuierliches Halten

7x drücken = Aus

LED-Lichtintensitäts-Anzeige

- Niedrig
- Mittel
- Hoch

Vibrationsmassage

- **1x drücken** = Hohe Intensität, kontinuierlich
- **2x drücken** = Mittlere Intensität, kontinuierlich
- **3x drücken** = Niedrige Intensität, kontinuierlich
- **4x drücken** = Aus

Hinweis: Alle 3 Funktionen können einzeln ein- und ausgeschaltet werden

Aufheizen

- **1x drücken** = Hoch
- **2x drücken** = Mittel
- **3x drücken** = Niedrig
- **4x drücken** = Aus

Lieferumfang und Bezeichnung der Teile:

1 x Belena BackWrap inkl. Controller,
1x USB Adapter

WICHTIGE HINWEISE + SICHERHEITSHINWEISE: VOR GEBRAUCH DIESES GERÄTS ALLE WARNHINWEISE UND ANLEITUNGEN LESEN UND BEFOLGEN. EINE NICHT SACHGEMÄSSE HANDHABUNG KANN VERLETZUNGEN HERVORRUFEN. ANLEITUNG FÜR DIE WEITERE VERWENUNG AUFBEWAHREN. NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH GEEIGNET.

- Nicht im Schlaf anwenden.
- Nicht bei Kleinkindern oder Tieren anwenden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Wartung durch Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von

Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Kissen nicht zerdrücken - scharfe Falten vermeiden. Legen Sie das Kissen auf und nicht unter die zu wärmende Körperpartie.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Kissen nicht benutzen. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Kinder anwesend sind.
- Ziehen Sie dieses Kissen niemals am Kabel. Verwenden Sie das Kabel nicht als Griff. Das Kabel nicht einklemmen.
- Controller und Kabel dürfen während des Gebrauchs nicht eingeklemmt, geknickt, gekreuzt, gequetscht oder umwickelt werden.
- Lassen Sie das Kissen niemals an einen Stromkreis angeschlossen, wenn es nicht benutzt wird. Bei Nichtgebrauch sollte dieses Kissen an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort aufbewahrt werden - vorzugsweise im Originalkarton.
- Prüfen Sie das Kissen, die Abdeckung, das Kabel und das Steuergerät vor jedem Gebrauch sorgfältig. Entsorgen Sie das Kissen, wenn es Anzeichen von Verschlechterung, Abnutzung oder Beschädigung aufweist. Nehmen Sie keine Reparaturen an diesem Kissen vor. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn das Kissen nicht zufriedenstellend

funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

- Wickeln Sie das Kabel bei der Aufbewahrung locker auf - eine enge Wicklung kann das Kabel und die inneren Teile beschädigen.
- Vor dem Aufbewahren abkühlen lassen und nicht zerknittern.
- Zubehörteile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Verwenden Sie das Kissen niemals, wenn der Stoff des Produkts nicht intakt ist.
- Diese Gebrauchsanleitung sicher aufbewahren.
- Das Kabel des Geräts ausstecken, falls es nicht benutzt wird oder gereinigt werden muss.
- Sollten Sie wider Erwarten Schmerzen oder Beschwerden verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort.
- Wenn Sie wegen besonderer Umstände (zB Schwangerschaft, Herzschrittmacher, gesundheitliche Einschränkungen) Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Stecken Sie das Kabel zuerst an den Adapter an und diesen anschließend in die Steckdose.
2. Drücken Sie die Heiz-Taste 1x und lassen Sie das Produkt 5 Minuten vorheizen. Vergewissern Sie sich, dass die Heiztaste auf der höchsten Stufe ROT leuchtet.
3. Legen Sie das Heizkissen so um die Taille, dass der Controller von Ihrem Körper weg zeigt.
4. Um eine der Funktionen auszuschalten,

drücken Sie die Einstellungen durch, bis die LED-Leuchte erlischt.

5. Vermeiden Sie es, das Kissen zu zerdrücken. Vermeiden Sie bei der Verwendung scharfe Falten.

INFO:

Wenn sich Ihr Heizkissen unerwartet ausschaltet (ohne die automatische Abschaltfunktion), gehen Sie wie folgt vor.


1. Ziehen Sie den Stecker des Geräts
2. 5 Minuten warten.
3. Stecker wieder einstecken und normal benutzen.

Optionale Taillenverlängerung


Dieses Produkt enthält einen Verlängerungsgurt für die Taille, der die Gesamtlänge der Rückenmanschette um ca. 30cm verlängert.

So befestigen Sie den Verlängerungsgurt:

Befestigen Sie den Klettverschluss der Verlängerung an der Innenseite des Gurts (zum Körper weisende Seite).

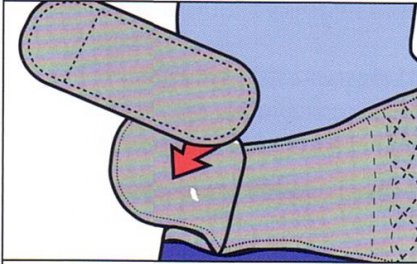

Legen Sie den teilweise fixierten Gurt um Ihre Taille und befestigen Sie die Verlängerung an den Haken und Schlaufen des Gurts.

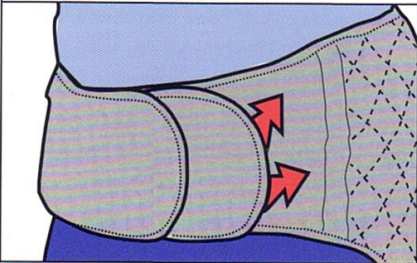

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION

Dieses Produkt verfügt über eine automatische Abschaltfunktion: Die Heizfunktion schaltet sich automatisch nach 2 Stunden ununterbrochener Nutzung ab, die Vibrations- und Lendenwirbelfunktion schalten sich nach 15 Minuten ununterbrochener Nutzung ab.

HINWEIS: Nach einem Stromausfall, wird der Timer automatisch zurückgesetzt.

Häufig gestellte Fragen:

Wie sollte ich das Produkt waschen?

Das Produkt ist nicht waschmaschinenfest und sollte nur punktuell mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Warum fühlt sich mein Belena BackWrap nicht heiß genug an?

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt 5 Minuten lang auf hoher Stufe vorgeheizt wird.

Was soll ich tun, wenn mein Controller das Gerät nicht einschalten will?

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie das Gerät erneut an, um es zurückzusetzen.

Was ist, wenn ich das Gerät versehentlich angelassen habe?

Das Gerät verfügt über eine 2-stündige Abschaltautomatik und eine 15-minütige Abschaltautomatik für die Vibrations- und Lendenwirbelfunktion.

REINIGUNG:

VORSICHT: NICHT WASCHEN! NICHT BLEICHEN! NICHT AUSWRINGEN!

1. Heizkissen vom Strom nehmen.
2. Mit einem feuchten Lappen oder milder Seifenlauge reinigen.
3. Zum Trocknen flach ausbreiten.
4. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
5. Weder den Stecker am Strom anschließen noch das Heizkissen einstecken, solange beide nicht vollständig trocken sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Größe: 129.6 cm x 24.5 cm

Nennleistung:

Eingang: 100-240V 50/60Hz 0.35A Max

Ausgang: 5V 2000mA

Timer für automatische Abschaltung

- Wärme: 2 Stunden
- Massage: 15 Minuten

3 Massageeinstellungen:

Automatische Abschaltung 15 Minuten

- Niedrige Geschwindigkeit Konstant
- Mittlere Geschwindigkeit Konstant
- Hohe Geschwindigkeit Konstant

3 Heizeinstellungen:

Automatische Abschaltung 2 Stunden
Niedriger Temperaturbereich (50°C)
Mittlerer Temperaturbereich (58°C)
Hoher Temperaturbereich (68°C)

6 Lendenwirbeleinstellungen:

Automatische Abschaltung 15 Minuten

- Niedrig Aufblasen / Luft ablassen
- Niedrig Aufblasen und Halten
- Mittel Aufblasen / Luft ablassen
- Mittel Aufblasen und Halten
- Hoch Aufblasen / Luft ablassen
- Hoch Aufblasen und Halten

Technische Daten:

Input: 5V== 2A

Power: 10 W

Netzteil /Adapter

Input: 100-240V~ 50/60Hz

Output: 5V== 2A 10W

Materialzusammensetzung: 100% Polyester



Haftungsansprüche gegen die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.



Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt

werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende seiner Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen und Lampen sowie Batterien und Akkus im entladenen Zustanden, welche nicht vom Gerät fest

umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, zu trennen und vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Mensch, Tiere und Pflanzen haben. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Verbraucher sind selbst verantwortlich, personenbezogene Daten vom Gerät zu löschen.



Schutzklasse 2



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



Hergestellt in China

CH: Mediashop Schweiz AG | Leuholz 14 |
8855 Wangen | Switzerland

EU: Mediashop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 -
kostenlose Servicehotline | **ROW: +43 1 267 69 67**

M35768 | Stand 07/2023